

Accufuser[®] Soft

MODE D'EMPLOI



REEMPLISSAGE



1
Dévisser le bouchon du site de remplissage.



2
Remplir une seringue de 60 ml avec la solution à perfuser.



3
Retirer le bouchon hydrophobe.

PURGE ET BRANCHEMENT




4
Vérifier que la solution perle.

SURVEILLANCE DE LA PERFUSION




5
Echelle graduée.

DÉBRANCHEMENT

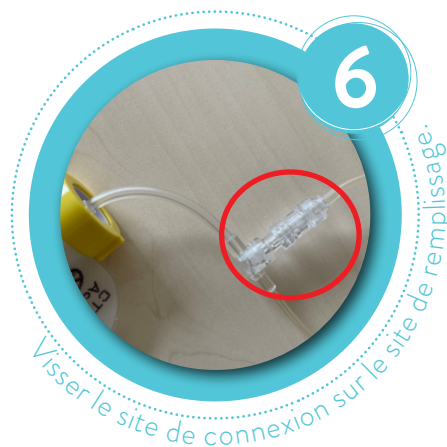

6
Visser le site de connexion sur le site de remplissage.

Attention de ne pas obstruer, ni coller le filtre éliminateur d'air à la peau.

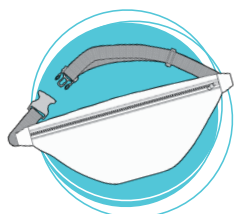

Une sacochette type « banane » est disponible sur commande.



La tubulure de transfert EZ Transfer Set[®], permet un remplissage facile, rapide et dans des conditions d'asepsie optimales. Disponible sur commande



Pour plus d'informations, se reporter au dossier technique de l'Accufuser Soft[®]

