

Accufuser⁺[®]

MODE D'EMPLOI



REEMPLISSAGE

1



Dévisser le bouchon du site de remplissage.

2



Remplir une seringue de 60 ml avec la solution à perfuser.

3



Retirer le bouchon hydrophobe.

PURGE ET BRANCHEMENT

4



Vérifier que la solution perle.

SURVEILLANCE DE LA PERFUSION

5



Échelle graduée.

DÉBRANCHEMENT


6




Visser le site de connexion sur le site de remplissage.




Une pince de fixation fournie pour les volumes ≤ 100 ml

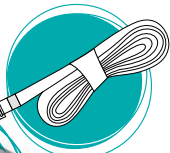

Un cordon fourni pour les volumes > 100 ml

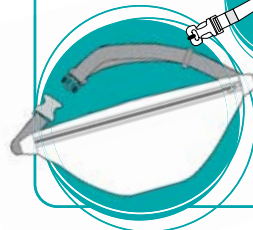

Une sacoche type « banane » est disponible sur commande

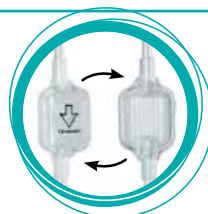

Attention de ne pas obstruer, ni coller le filtre éliminateur d'air à la peau.



Pour plus d'informations, se reporter au dossier technique de l'Accufuser⁺[®] sur www.wymfrance.com